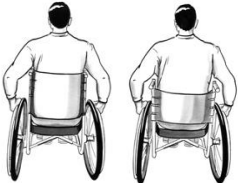


Контрольний список налаштування крісла колісного в надзвичайних ситуаціях

1. Чи готове крісло колісне до використання?

Чи пройшло крісло колісне перевірку, щоб переконатися, що воно безпечне у використанні та всі його частини працюють?	☐
--	--------------------------

2. Перевірка розміру й налаштування

Ширина сидіння: Має щільно прилягати.		☐	Глибина сидіння: Відстань у два пальці між тильною частиною коліна та сидінням/подушкою.		☐	
Висота підніжок: Стегна повністю спираються на подушку без зазорів. Стопи повністю спираються на підніжки без зазорів.						☐
Висота спинки: Користувач крісла колісного має необхідну підтримку та свободу рухати плечами для штовхання ободів (для самостійного руху).						☐
Положення задніх коліс: Особа може рухати крісло колісне схилом вгору і вниз без відриву поворотних коліщат від поверхні (у випадку самостійного руху).						☐

3. Перевірка постави

Чи може користувач крісла колісного зручно сидіти вертикально?	☐
Перевірити поставу збоку.	☐
Перевірити поставу спереду/ззаду.	☐

4. Перевірка налаштувань під час руху крісла колісного

Чи дає спинка користувачеві крісла колісного свободу рухати плечима для штовхання?	☐
Чи дає спинка достатню підтримку користувачеві крісла колісного?	☐
Чи залишаються стопи користувача крісла колісного на підніжках?	☐
Чи правильне положення задніх коліс для користувача?	☐

5. Додаткові дії

Чи потрібні додаткові дії? Запишіть будь-які дії в картку користувача крісла колісного.	☐
---	--------------------------

Пам'ятайте: наступним кроком після налаштування є навчання користувача.