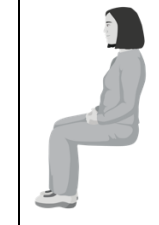


ステップ 1: 選択 車椅子 オプション	下肢切断	高齢者	神経学的疾患		一時的負傷
			脊髄損傷 / 二分脊椎	脳卒中 / 外傷性脳損傷 / 脳性麻痺	
車椅子 クッション	✓	✓	✗	立って移乗できる場合	✓
除圧 クッション	✗	褥瘡の危険が ある場合	✓	褥瘡の危険が ある場合	褥瘡の危険が ある場合
予備の除圧 クッション	✗	漏出 (失禁など) で困っている場合			✗
脚部挙上機能 / 断端支持板	膝下切断の 場合	✗	✗	✗	治癒の補助と して必要な場合
まっすぐに 座るための 追加の支え	✗	まっすぐに座る のが難しい場合	まっすぐに座る のが難しい場合	✓	✗

ステップ 2: 適合 腰を座面の奥 まで入れても らう。必要なら 介助する。						
	座幅 両手が本人と車椅子 の間でなめらかに 滑る	座面奥行き 椅子～膝裏間が指幅 2 本 分。ふくらはぎへの圧迫 がないことを確認	フットサポート (足台) 高さ 足が足台板に、大腿が クッションにべったり 据わっている	まっすぐに 座る 左右から 確認	まっすぐに 座る 正面から 確認	
背もたれの 調整	高い背もたれを検討する人: • たいへん背が高い • すぐに疲れる • 追加の支えを希望			低い背もたれを検討する人: • たいへん背が低い • 壮健で活動的 • 追加の支えなしでうまく座れる		
駆動輪の 調整	安全な駆動輪位置を検討する人: • 両脚を切断している • 後ろへの転倒が不安			活動的な駆動輪位置を検討する人: • 壮健で活動的		

	• 背が高い • 制御できない運動に見舞われるとバランスを失う	• すでに駆動輪のみでバランスを保つこと（ウィリー）ができる • 背が低い
--	--	--